


ShockLink

Instrukcja użytkowania

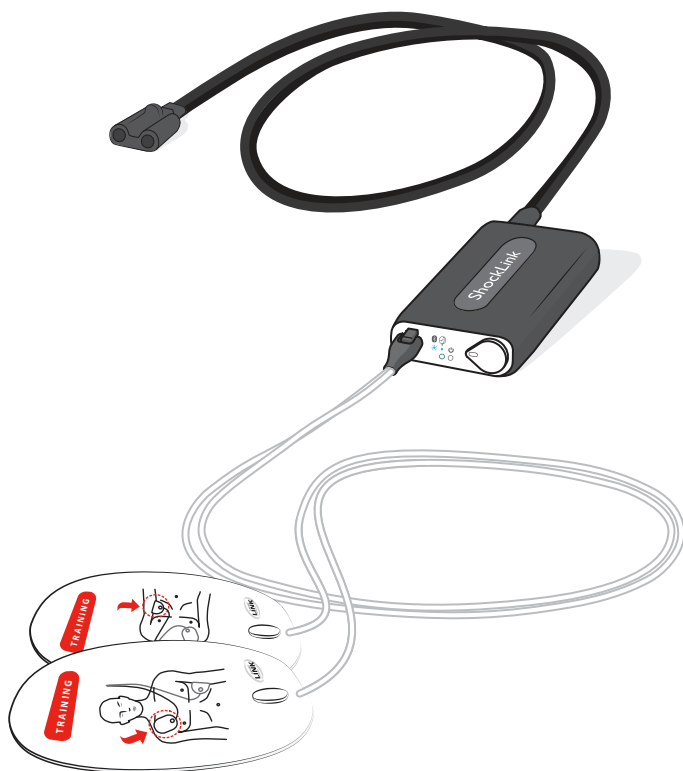

Zamierzone zastosowanie

ShockLink umożliwia podłączenie kompatybilnych defibrylatorów pod napięciem do manekinów treningowych i symulatorów pacjenta przygotowanych do współpracy z tym urządzeniem. Pozwala to zwiększyć realizm szkoleń w stosowaniu defibrylacji w podstawowych zabiegach resuscytacyjnych (BLS) i zaawansowanych zabiegach resuscytacji krążeniowej (ACLS).

Szkolenie zaczyna się od podłączenia urządzenia ShockLink do elektrod treningowych i kompatybilnego defibrylatora. Energia wstrząsu z defibrylatora ulega rozładowywaniu w przewodzie urządzenia ShockLink.

ShockLink eliminuje potrzebę stosowania specjalnych manekinów przystosowanych do szkoleń z użyciem defibrylatora i symulatorów pacjenta z zatrząskami na klatkę piersiową lub skrzynką obciążenia służącą do pochłaniania energii wstrząsów.

Więcej informacji na temat urządzenia i technologii ShockLink, części zamiennych i akcesoriów można znaleźć na stronie www.laerdal.com/ShockLink.

Elementy zestawu



ShockLink



Pilot urządzenia ShockLink



1 bateria AAA



Elektrody szkoleniowe




Woreczek




Instrukcja użytkowania



Ważne informacje
dot. produktu

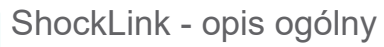


Pilot - opis ogólny

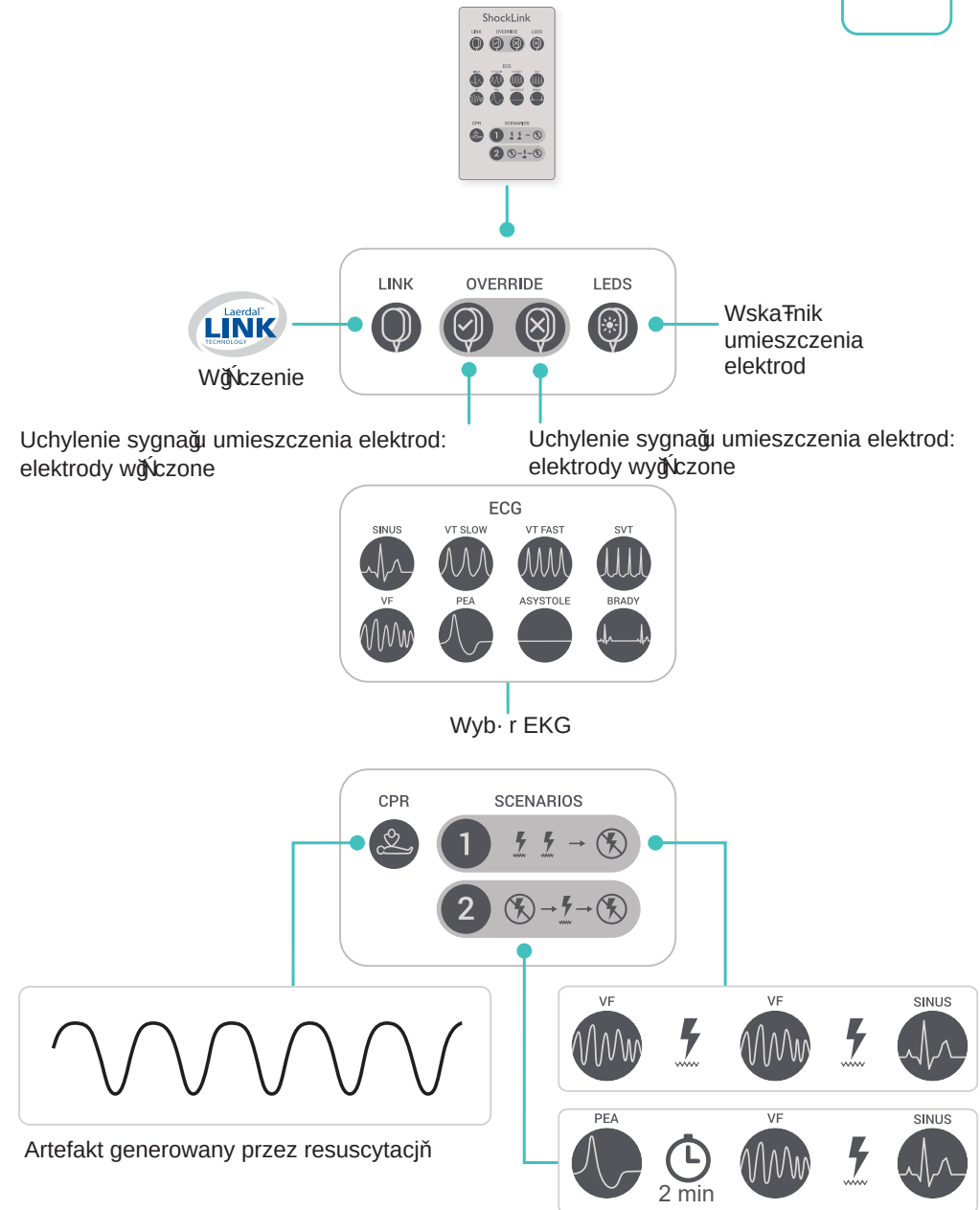


 Uwaga
Technologia Laerdal LINK umożliwia automatyczne wykrywanie prawidłowego umieszczenia elektrod.

Sposób podłączenia

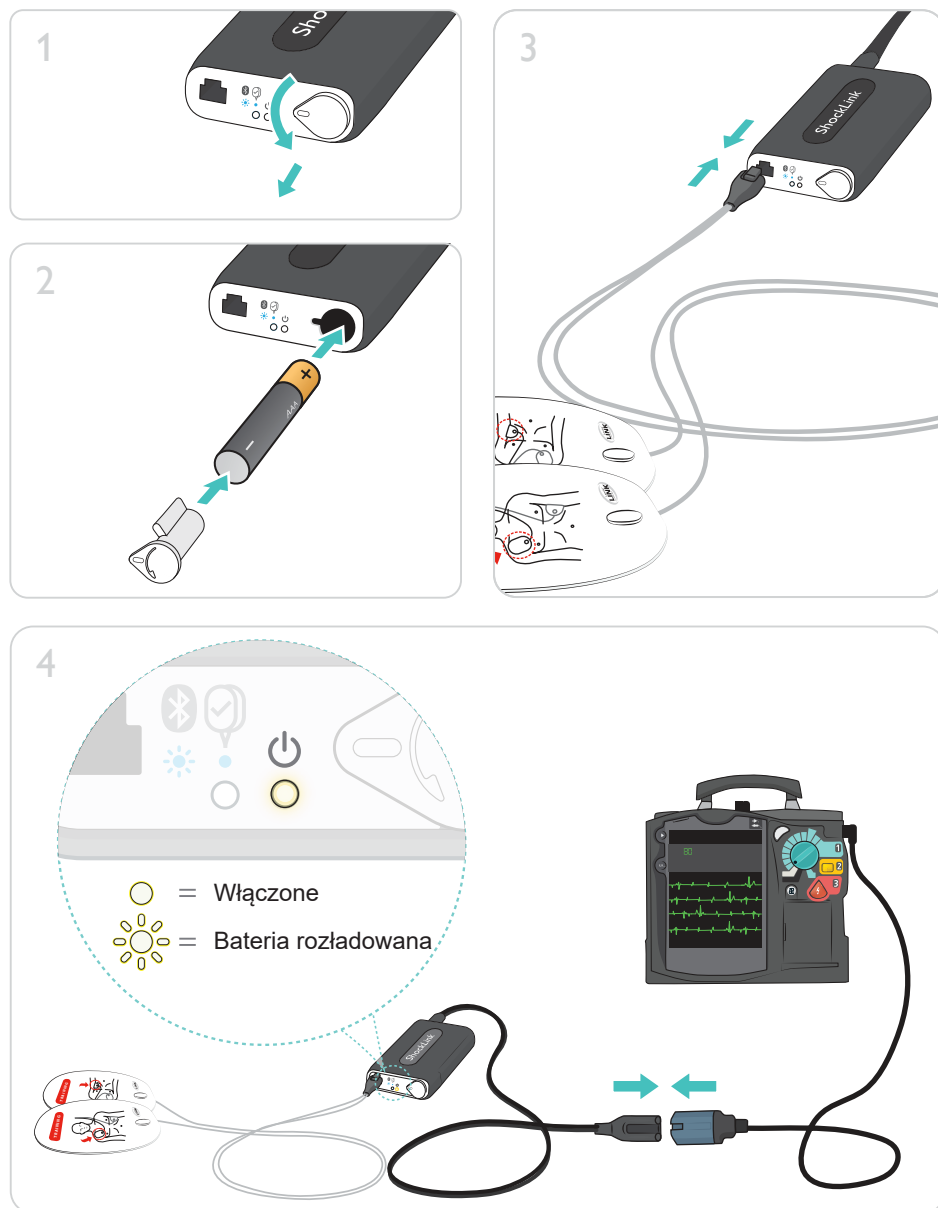

Uwaga
Po włączeniu defibrylatora ShockLink włącza się automatycznie.


Sposób podłączenia

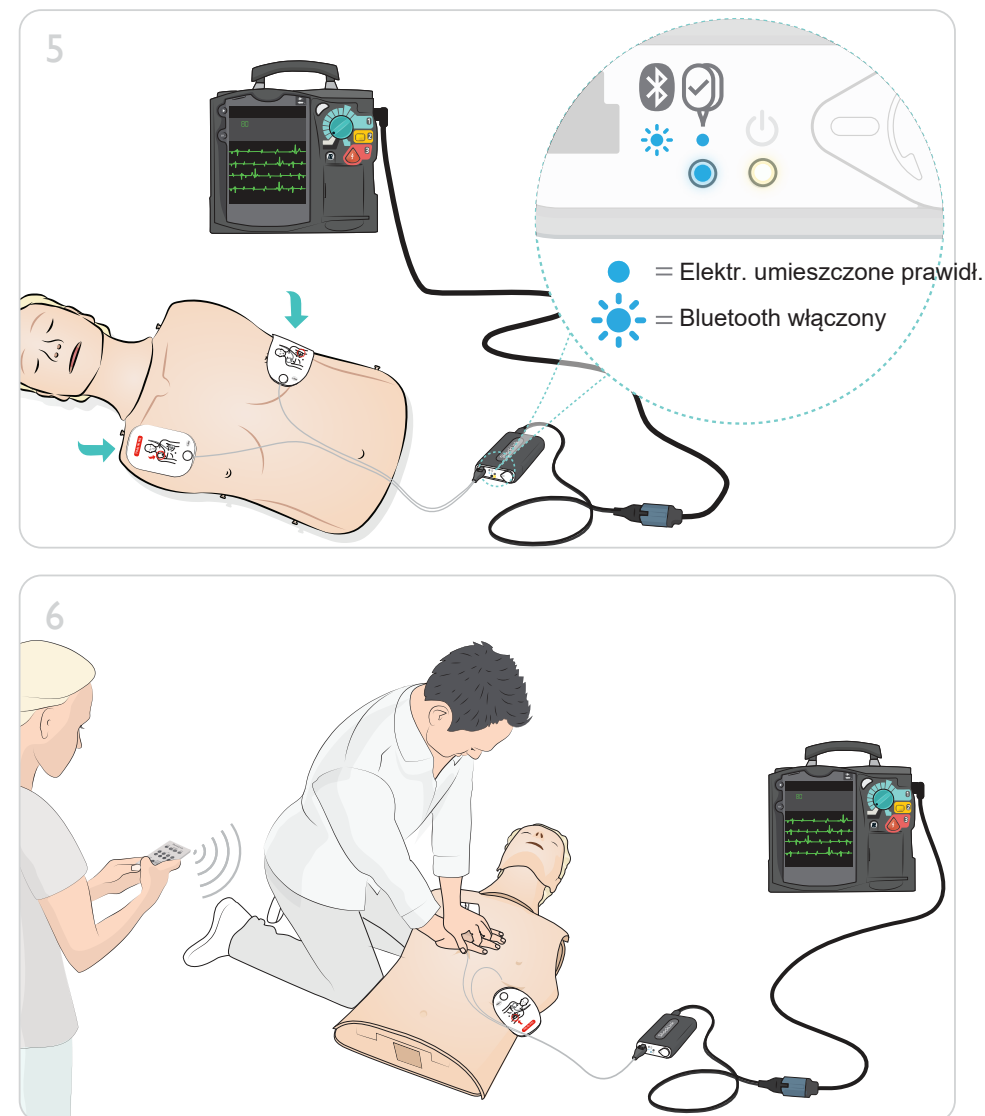

- Uwagi**
- Aby zresetować urządzenie ShockLink, należy wyjąć baterię i włożyć ją ponownie po 5 sekundach.
 - Elektrody szkoleniowe należy zdjąć natychmiast po użyciu, aby na skórze klatki piersiowej manekina nie zostały ślady kleju.

Sposób podłączenia - kompatybilność

Wybrać jedną z następujących opcji sterowania:

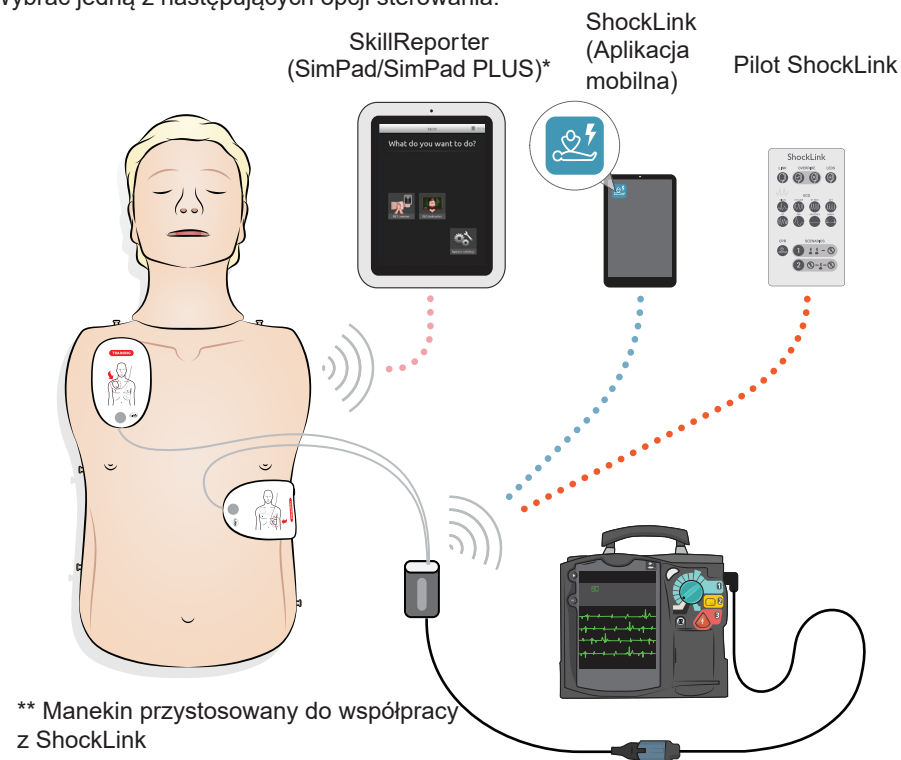


- WiFi
- Bluetooth
- Podczerwień

* SkillReporter komunikuje się z ShockLink za pośrednictwem manekina po wykryciu prawidłowego umieszczenia elektrod.

** Informacje na temat kompatybilnych manekinów i symulatorów można znaleźć na stronie www.laerdal.com/ShockLink.

Sposób podłączenia - kompatybilność

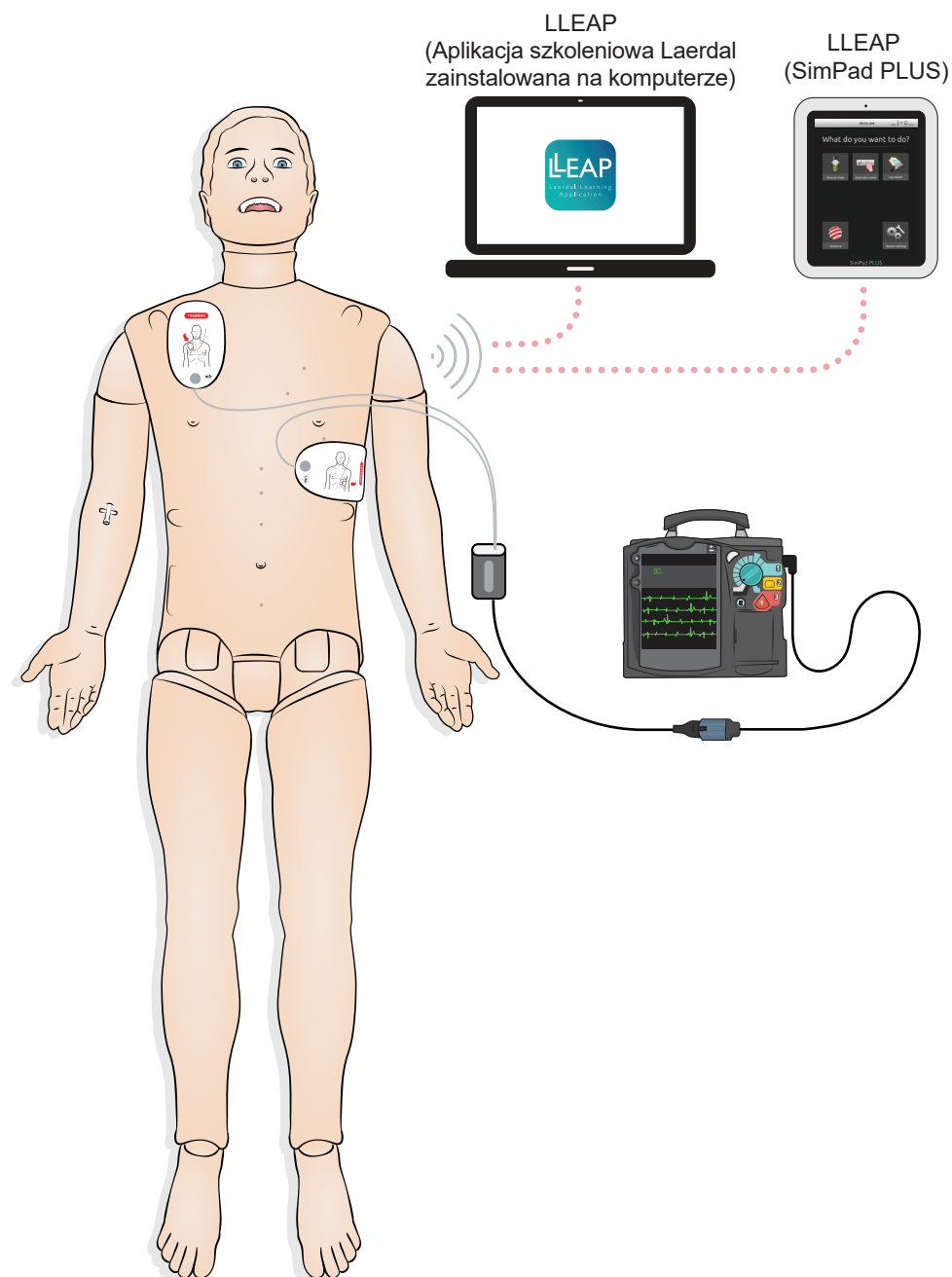

© 2016 Laerdal Medical AS. Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Producent: Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norwegia
T: (+47) 51 51 17 00

Wydrukowano w Chinach

20-09355 Wersja B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives